

Transfer • Umlagerung


1=4

Heben • Nässeschutz

Zur optimalen Pflege
betflägeriger Patienten


Ergonomisch wirtschaftliches Hilfsmittel
zur Unterstützung des Pflegepersonals

TergoGlide

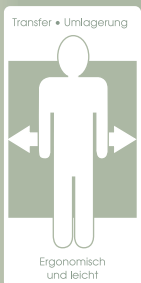

- Erleichtert den Patiententransfer
- Unterstützt die Umlagerung des Patienten
- Inkontinenzschutz mit hoher Saugeigenschaft
- Sicher und angenehm für den Patienten

TergoGlide

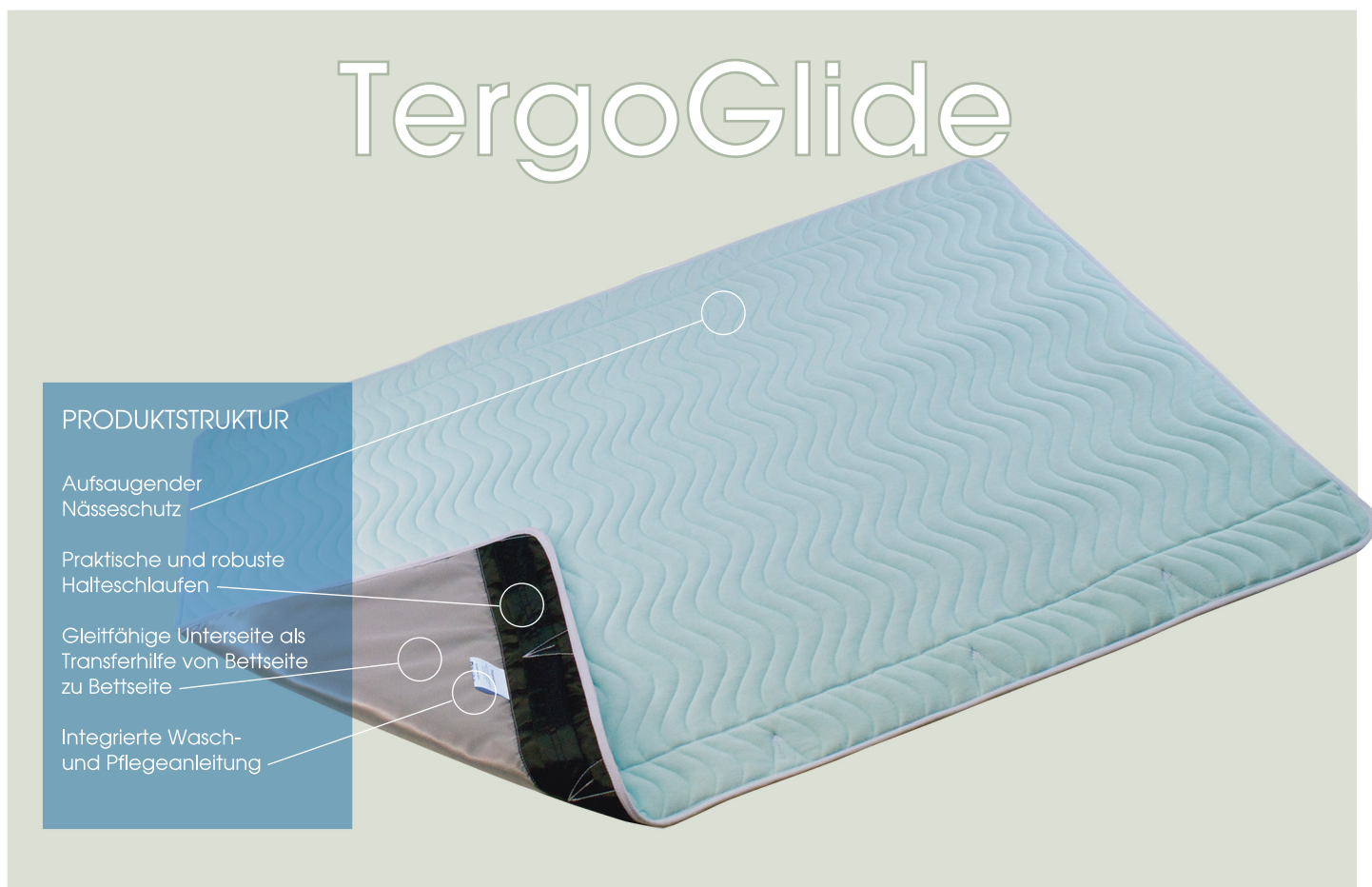

PRODUKTSTRUKTUR

Aufsugender Nässeschutz

Praktische und robuste Halteschlaufen

Gleifähige Unterseite als Transferhilfe von Bettseite zu Bettseite

Integrierte Wasch- und Pflegeanleitung

TergoGlide ist ein ergonomisches und gleichzeitig wirtschaftliches Hilfsmittel zur Unterstützung des Pflegepersonals

TergoGlide ist die neueste Produktentwicklung der Carital Gruppe. Es ist perfekt auf Ihre Bedürfnisse und den praktischen Anforderungen für die Umlagerung bei bettlägerigen Patienten abgestimmt. Der integrierte textile Inkontinenzschutz rundet das Profil dieses Allrounders ab!

Die Haltegriffe des TergoGlide sind robust und an den ergonomisch richtigen Stellen angebracht. Sie erleichtern die Anwendung und entlasten durch den sicheren Griff das Pflegepersonal. Die außergewöhnliche Größe ermöglicht es den Patienten auf der Unterlage komfortabel, Gewebe schonend und mit einem hohen Sicherheitsgefühl zu transferieren. Durch seine speziell entwickelte Gleiteigenschaft ermöglicht es einen angenehmen und schmerzfreieren Transfer von Bettseite zu Bettseite. Durch die integrierte Inkontinenzauflage ist das TergoGlide auch immer am, bzw. unter dem Patienten und sofort einsatzfähig. Ein feuchtes TergoGlide tauschen Sie bitte aus. Mit unserem Schulungsvideo erhalten Sie Tipps und Tricks für die Anwendung und den Austausch.

TergoGlide ist ein weiteres Produkt der Carital Gruppe mit dem Sie kosteneffizient und Kräfte schonend für den Patienten und für die Pflegekräfte arbeiten können.

TergoGlide ist sicher und angenehm für den Patient

Die Patienten selbst empfinden den Transfer mit Hilfe des TergoGlide als angenehm komfortabel, schonend und sicher. Im Vergleich zu üblichen Transfermöglichkeiten reduziert das TergoGlide aktiv Schmerzen da beim Transfer selbst kaum Reibung oder Scherkräfte auf den Patienten wirken. Dies wirkt sich auch auf das Dekubitusrisiko aus. Ein selbstständiges Bewegen wird auf dem TergoGlide dank der Oberflächenstruktur gefördert. Der Austausch des TergoGlides ist sehr einfach in der Handhabung.

Technische Daten

Standardgröße	88x120 und 105x120 cm
REF/Art.-Nr.	TERGO-88120 und TERGO-Lift
Saugeigenschaft	30dl/m ²
Pflegetipps	Bitte Waschanleitung beachten! Maximale Waschttemperatur 95°C max. 10 Minuten, sonst 70°C. Die Temperatur von Trockner reduzieren.
EU-Direktiv	MDD 2007/47/EC: Klasse 1 (CE)
Sicherheitsstandard	Getestet nach ISO 10535
ACHTUNG!	Das Heben von Patient mit mehr als 200 kg Gewicht ist verboten. Die Verwendung von defekten Produkten ist strengstens untersagt!

KTS
Pflege- und Medizintechnik

 **Carital**
Ware for Care